



Yemina 细胞计数软件使用说明书

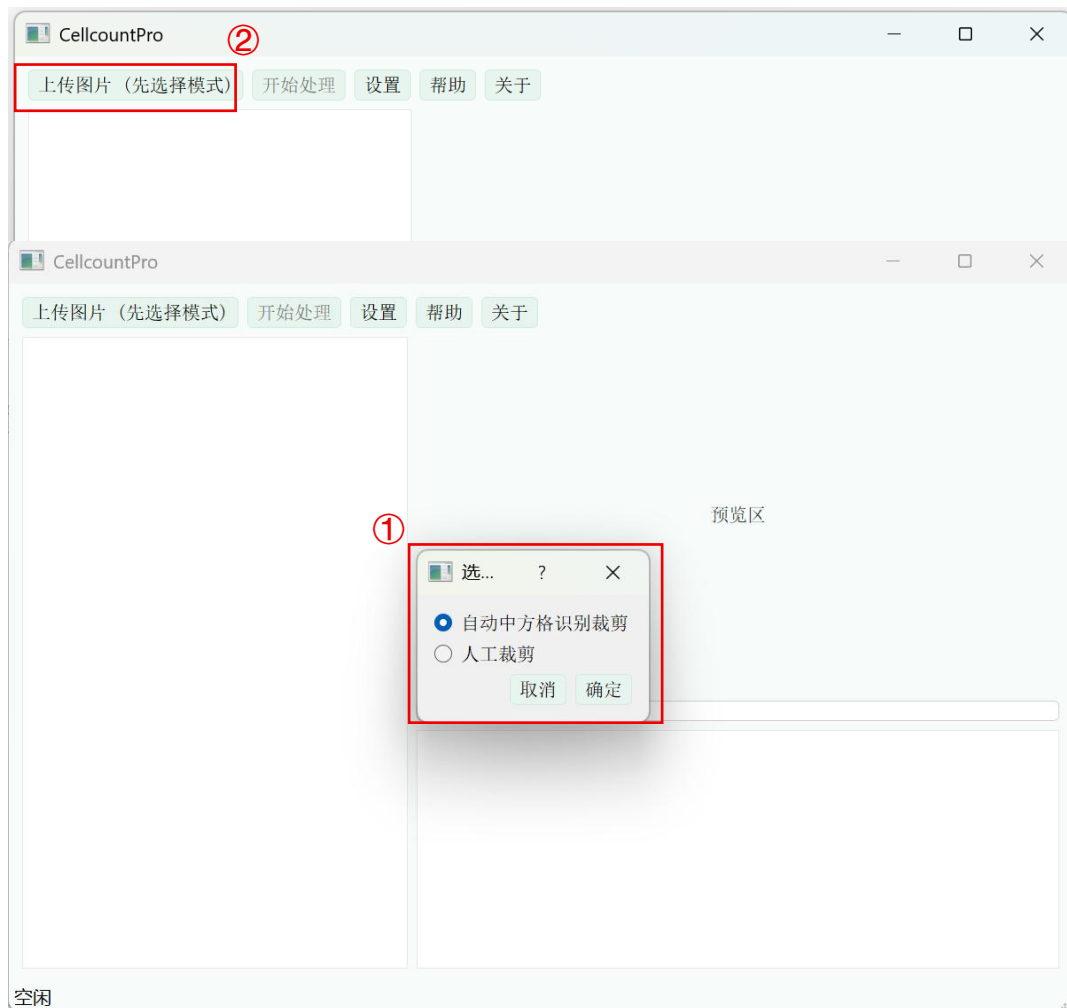


软件只支持统计中方格中的细胞数目，可进一步选择用何种方式裁剪中方格。


1. 若选择自动中方格识别裁剪

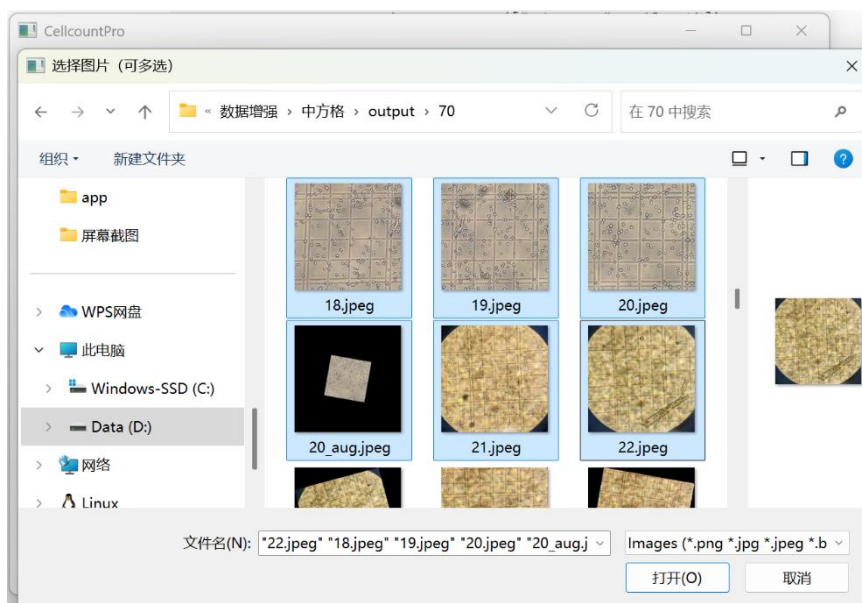



可一次性选择多张图片进行上传处理，建议图片命名尽量简短

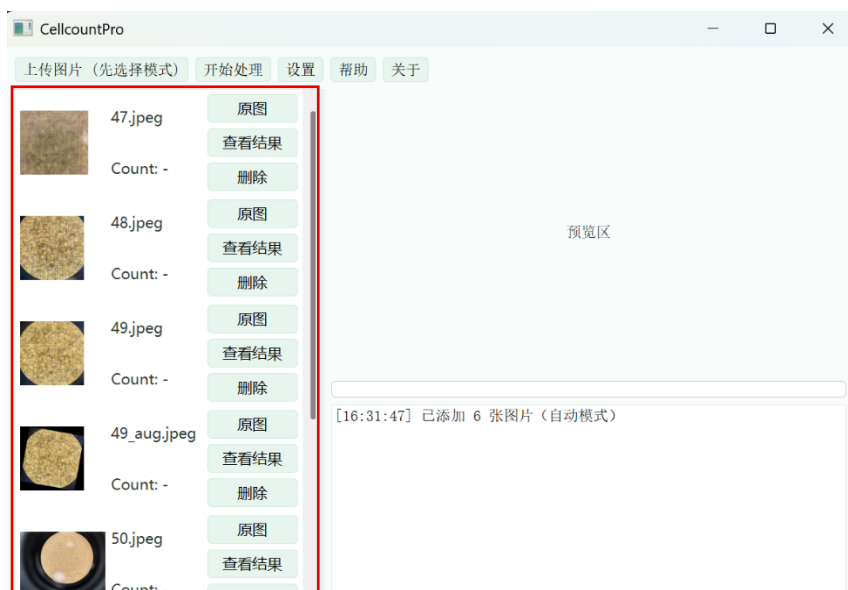

可在左侧看到上传的图片，选中图片后可放大或者删除该图片

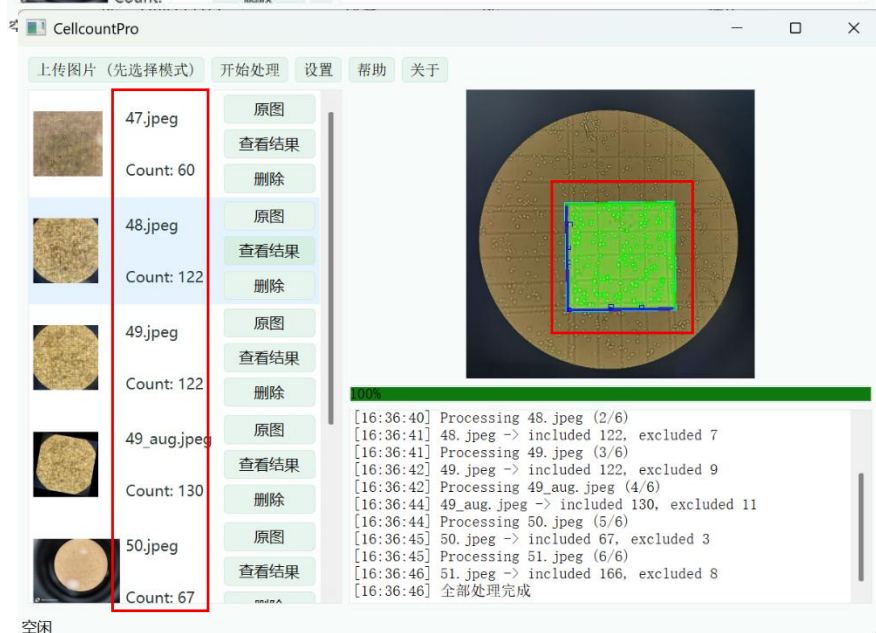

可在左侧看到上传的图片对应的细胞数量，右侧绿色区域（颜色可以在设置中调整）即为算法识别的中方格区域

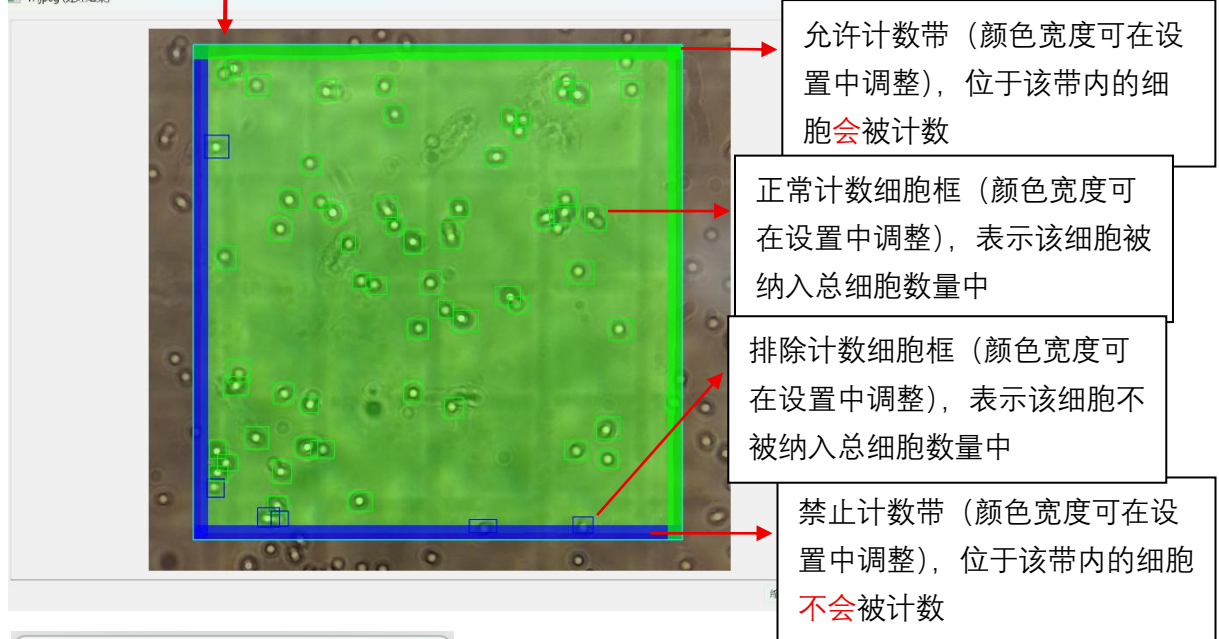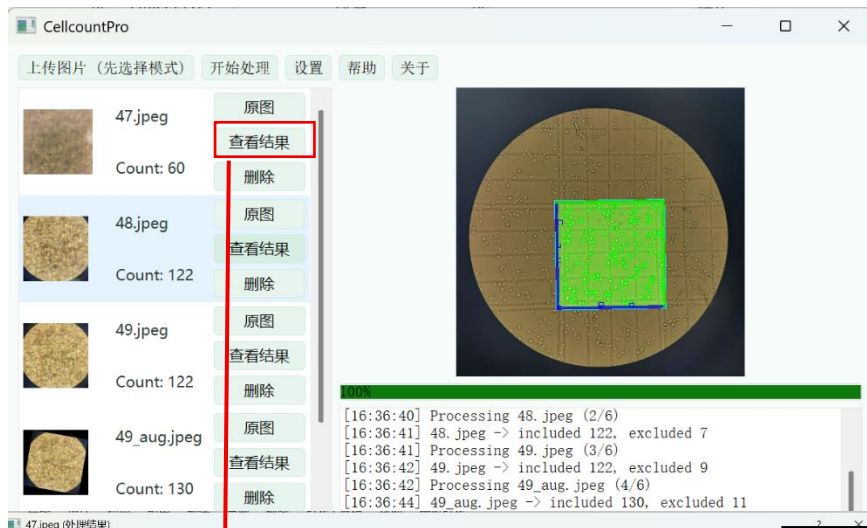


保持默认即可


计数带的宽度

中方格区域填充颜色透明度


2. 若选择人工裁剪

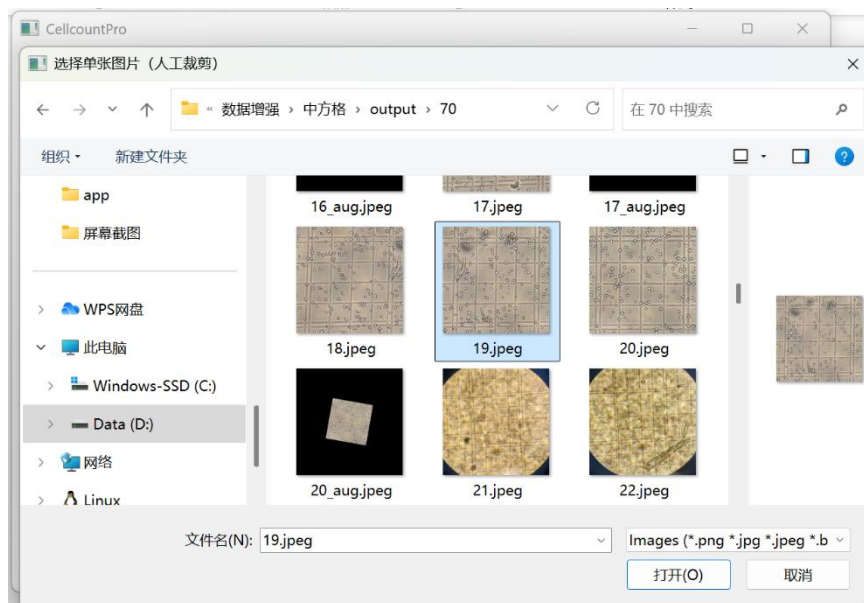

由于需要对每张
图片进行手动裁
剪，所有单次只
可选择**一张图片**
上传

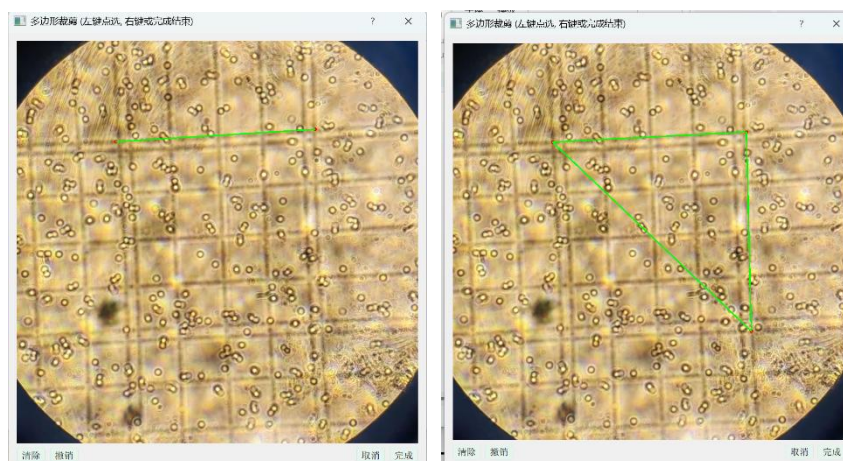

可以通过在图上选择
边界点来构成需要裁
剪的区域，**需要按找**
轮廓顺时针或者逆时
针旋转边界点。

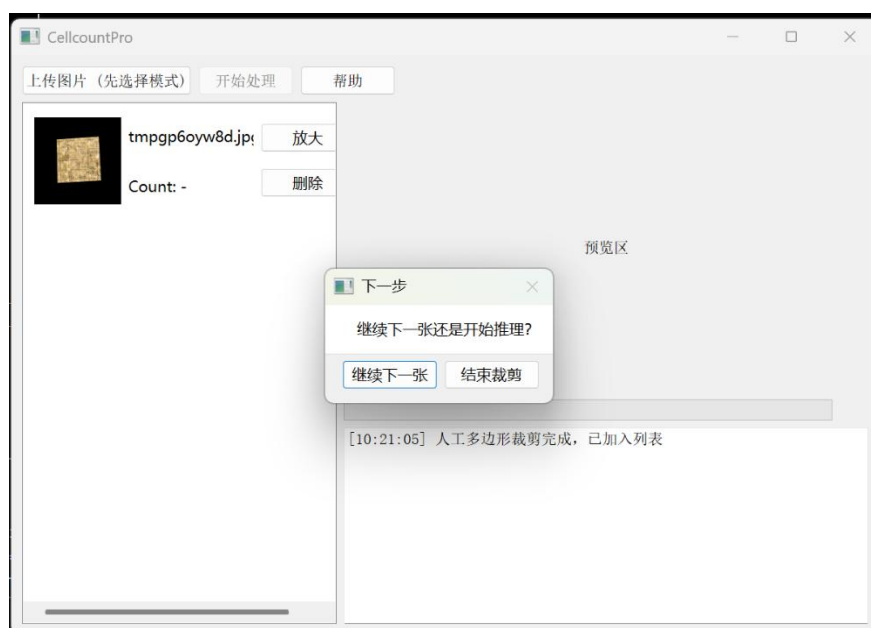

可在左侧看到已经裁
剪好的图片，若完成
图片裁剪，可点击**结
束裁剪**，然后点击**开
始推理**进行计数